
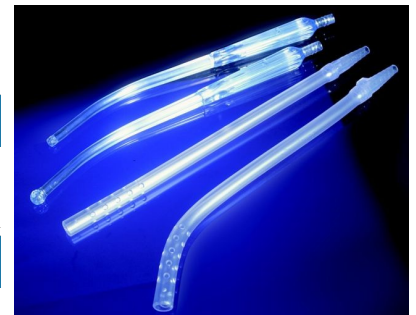
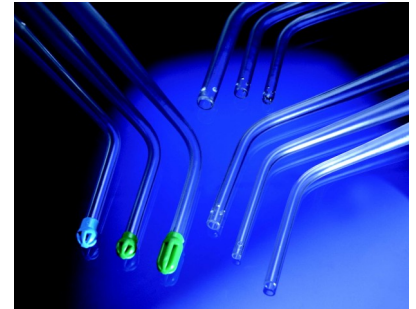


# FICHE TECHNIQUE


## Canules d'aspiration chirurgicale Yankauer

### CARACTERISTIQUES GENERALES

Canules d'aspiration <i>pédiatriques</i> Yankauer (extrémité ouverte)		Carton
LY-4401	CH 15 - longueur 195 mm - 2 Œils <b>avec</b> contrôle d'aspiration	100 u
LY-4400	CH 15 - longueur 195 mm - 2 Œils <b>sans</b> contrôle d'aspiration	
Canules d'aspiration coudées Yankauer (extrémité ouverte)		Carton
Avec contrôle	Sans contrôle	Avec ou sans contrôle du vide
LY-4501	LY-4500	CH 12 - longueur 255 mm - <b>canule fine</b> 2 Œils
LY-3501	LY-3500	CH 12 - longueur 250 mm - <b>canule fine</b> 2 Œils
LY-4601	LY-4600	CH 18 - longueur 255 mm - <b>canule moyenne</b> 6 Œils
LY-4701	LY-4700	CH 22 - longueur 260 mm - <b>canule forte</b> 6 Œils
LY-3701	LY-3700	CH 22 - longueur 255 mm - <b>canule forte</b> 6 Œils
LY-3801	LY-3800	CH 28 - longueur 255 mm - <b>canule extra forte</b> 4 Œils
Canules d'aspiration coudées Yankauer avec crépine (souple)		Carton
LY-3603	CH 18 - longueur 265 mm - sans Œils et <b>avec</b> contrôle d'aspiration	50 u
LY-3602	CH 18 - longueur 255 mm - sans Œils et <b>sans</b> contrôle d'aspiration	
Canule d'aspiration Yankauer « Poole » (extrémité ouverte)		Carton
YS-3006	CH 20 - Embout droit - longueur 300 mm - 4 x 5 Œils opposés	50 u
YS-3007	CH 15 - Embout rigide - longueur 300 mm	
Canule d'aspiration coudée Yankauer « Selectovac »		Carton
YS-3009	CH 24 - Canule avec crépine - poignet de préhension bleu clair- bouton on/off - longueur 265 mm - crépine 4 Œils opposés - Dia. Int. 8 mm	50 u
YS-3010	CH 24 - Canule embout droit sans bulbe - bouton on/off - longueur 265 mm - 4 Œils opposés - Dia. Int. 8 mm	
Canule d'aspiration Yankauer « Derby »		Carton
YS-3004	CH 24 - Embout bulbe - longueur 265 mm	50 u
YS-3005	CH 24 - Embout bulbe avec aspiration contrôle - longueur 265 mm	
Canule d'aspiration Yankauer femelle		Carton
LY-3700F	CH 22 - Embout godet - longueur 295 mm	50 u
LY-3700/R/FF	CH 22 - Embout PVC souple - longueur 295 mm	
LY-4600/R/FF	CH 18 - longueur 280 mm	
Canules d'aspiration droite maxi plus Yankauer		Carton
LY-3800/S	CH 28 - longueur 255 mm - 4 Œils avec contrôle d'aspiration	50 u

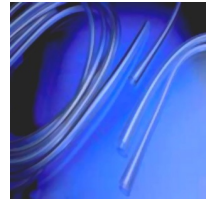

Ergonomique : la forme de la canule permet au chirurgien de travailler confortablement dans n'importe quelle orientation. Légère et parfaitement équilibrée elle réduit la fatigue des mains et la tension au niveau des poignets.

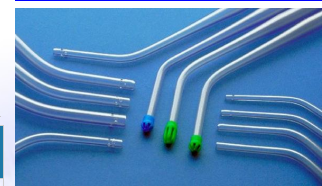

Les canules de Yankauer en PVC sont préconisées pour l'aspiration chirurgicale générale atraumatique et pour les opérations provoquant des saignements abondants. Atraumatique par la qualité de l'arrondi poli de l'embout.

**Les canules de Yankauer à extrémité fine 2 œils** sont préconisées pour les applications neurologiques, cosmétiques et chirurgie pédiatriques, ainsi que pour les opérations vasculaires complexes.

**Les canules de Yankauer avec crépine** sont préconisées pour une aspiration plus importante en chirurgie thoracique et gastro-intestinale. La crépine permet d'éviter l'obstruction de la canule par des éléments tissulaires ou osseux. Atraumatique pour les tissus par la qualité de la crépine.

### INFORMATIONS TECHNIQUES

**Sans LATEX**

**Sans Phtalates**

**Stérilisation :** Oxyde d'éthylène

**Fabriqué par :** Peninne (Angleterre)

**Normes CE 0473**

**Classe IIa**