

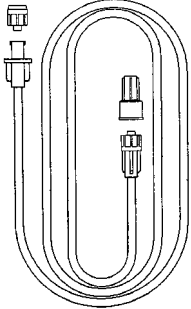
# PROLONGATEURS POUR POUSSSES-SERINGUES SANS DEHP STERILE LUER LOCK MÂLE/FEMELLE

## Caractéristiques

**Tubulure** : Ø interne = 1,5 mm - Ø externe = 3 mm - Résistance à la pression 4 Bars max (58 psi)

**Embouts** : 1 embout Luer Lock femelle et 1 embout Luer Lock mâle

**Résistance à la pression** : 1 bar – 14 psi

	Réf sans DEHP	Longueur tubulure (cm)	Volume résiduel (ml)	Conditionnement par carton (unités)
	137.01	10	0,219	200
	137.03	30	0,288	
	137.05	50	0,342	
	137.10	100	0,374	
	137.15	150	0,574	
	137.20	200	1,193	

## Utilisation

Prolongateur pour pousses-seringues diamètre 1,5 mm intérieur sans latex, Luer Lock mâle /femelle, pour perfusion, transfusion et nutrition parentérale, stérile à usage unique

Accessoire de dérivation complémentaire permettant de raccorder entre eux des dispositifs médicaux de perfusion, transfusion ou nutrition parentérale.

Avant la mise en place du dispositif purger la tubulure et vérifier la qualité des connections effectuées.

## Durée d'utilisation

En application de la norme NFS 90 202, les nécessaires à perfusion ne doivent pas être utilisés plus de 24 heures. La qualité de nos produits permet, dans des conditions normales de manipulation, leur utilisation jusqu'à 36 heures. Au-delà, nous ne pouvons garantir l'absence de modifications des caractéristiques mécaniques et technologiques des matériaux constitutifs du nécessaire.

## Matériaux utilisés

**Tubulure** : PVC transparent **sans DEHP**

**Embouts** : Luer Lock femelle : PVC rigide

Luer Lock mâle : Acrylonitrile Butadiène Styréne (ABS) blanc

**Capuchon pour embouts terminaux** : Polyéthylène (PE)

## Stérilisation

**Mode** : Oxyde d'Ethylène - EO (Stérilisé par : OIARSO S. COOP.)

**Conservation** : 5 ans après la date de stérilisation

## Conformité

CE 0318 marquage CE selon la Directive Européenne 93/42/CEE - Classe I

Certification ISO : Bexen® a mis en place et maintient un système qualité conformément aux exigences de la Normes ISO 9001.

<i>Distribué par</i>	<i>Fabriqué par</i>
<b>L.D.T.A.S. APOTECNIA – KELIS MEDICAL</b> <b>51 – 55 Avenue des Templiers 13400 Aubagne</b>	<b>OIARSO S. COOP. (Bexen®) en Espagne</b>