
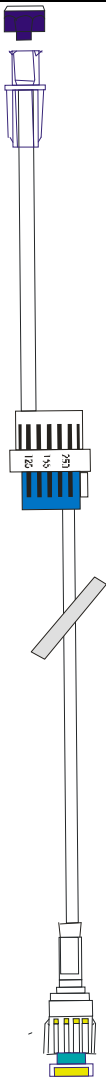


|   |                |   |
|---|----------------|---|
| <b>REGULATEUR DE DEBIT DE PRECISION<br/>AVEC PROLONGATEUR 48 cm</b> | <b>EMC7120</b> | <b>REGULATEUR<br/>DE DEBIT DE<br/>PRECISION</b> |
|---|----------------|---|

|  |           |   |   |
|--|-----------|---|---|
| <b>conditionnement<br/>(unités / carton)</b> | 100       | <b>Dispositif pour injections<br/>extemporanées</b> |  |
| <b>Longueur (cm)</b>                         | <b>48</b> | <b>Dispositif multivoies</b>                        |   |
| <b>Volume résiduel<br/>(ml)</b>              | 3.2       |   |   |

|   |  |
|---|--|
| <h2>Les points forts</h2>   |  |
| <p><b>Le Control-A-Flo</b> comporte un système unique de compensation des variations de pression lors de la perfusion par gravité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I) Il ajuste automatiquement les variations de débit résultant de variations de pression dans le prolongateur de façon à maintenir la stabilité du débit pré réglé</li> <li>II) Le débit reste constant au niveau pré réglé (+/- 10%) lorsque la hauteur de la poche et située entre 75 et 150 cm approximativement</li> <li>III) Plus besoin de vérifier aussi souvent le débit ni même de le réajuster.</li> <li>IV) Sans phtalates</li> </ul> |  |
| <p><b>Tubulure</b><br/>Souple, elle évite les plicatures</p>  |  |
| <p><b>Emballage</b><br/>Blister individuel pelable<br/>Identification du code produit facile<br/>Ouverture aisée</p>  |  |

|  |  |
|--|--|
| N° Marquage CE : G2S 00 02 13 133 011<br>Normes : ISO 9001/EN 29 001/EN 46 001 | Stérile et apyrogène<br>Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (ETO) |
|--|--|

# **COMPOSANTS DU REGULATEUR DE DEBIT DE PRECISION**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Embout proximal</b>     | Connexion Luer Lock femelle en PABS<br>Protecteur de stérilité en PE  |
| <b>Régulateur de débit</b> | Corps en polycarbonate et diaphragme en<br>silicone                   |
| <b>Tubulure</b>            | PVC<br>Diamètre interne 2,6 mm  |
| <b>Clamp latéral</b>       | PE<br>Arrête le débit   |
| <b>Embout terminal</b>     | Luer Lock mobile en PABS et filtre de purge<br>avec arrêt automatique |
| <b>Sans phtalates</b>      |   |
| <b>Emballage unitaire</b>  | Une face papier et une face en<br>Polyester/Polyéthylène              |

## **RENSEIGNEMENTS**

**Baxter SAS**  
Division Medication Delivery  
Avenue Louis Pasteur  
BP 56  
78 311 Maurepas Cedex

Tél : 01 34 61 50 50  
Fax : 01 34 61 55 30

## **COMMANDES**

**Baxter SAS**  
Division Medication Delivery  
Avenue Louis Pasteur  
BP 56  
78 311 Maurepas Cedex

Tél : 01 34 61 50 50  
Fax : 01 30 49 27 59