

# FICHE TECHNIQUE

## Prolongateur verrou mobile avec robinet 3 voies et un bouchon BD Q-Syte™

### REFERENCES

79600005 Prolongateur 15 cm avec robinet 3 voies et BD Q-Syte™

### DESCRIPTIF

Accessoire de dérivation complémentaire permettant de raccorder entre eux des dispositifs médicaux de perfusion, transfusion ou nutrition parentérale.

Avant la mise en place du dispositif, purger la tubulure, et vérifier la qualité des connections effectuées.

En application de la norme NFS 90 202, les nécessaires à perfusion ne doivent pas être utilisés plus de 24h. La qualité de nos produits permet, dans des conditions normales de manipulation, leur utilisation jusqu'à 48h ou 100 activations du Bouchon Q-syte.

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Prolongateur 15 cm avec robinet 3 voies et BD Q-Syte™
- Tubulure : sans phtalates, Ø int. 2 x 4mm, volume résiduel 0,8ml.
- Sans latex.
- Embout luer lock mobile avec filtre de purge.
- Evite la torsion de la tubulure au moment du vissage.
- Robinet 3 voies: résistant aux intralipides avec bouchon système clos BD Q Syte connection sans aiguille.
- Insertion dans l'axe longitudinal (participe à la réduction des hémolyses lors des prélèvements sur cathéters).
- Résistance à la pression : 3 bars / 45 PSI
- Débit voie distale : 530 ml/ mn
- Débit voie latérale : 480 ml/mn

*Contre indication : utilisation en service de radiologie non recommandée*

### COMPOSITION DES MATERIAUX

- PVC sans phtalates
- Polycarbonate/ polyéthylène/ ABS
- Polypropylène / Papier/ Polyester
- Polyamide

### QUALITE


- **Fabriqué par** : Promepla SA (France)
- **Durée de validité** : 5 ans
- **Conservation** : Dans un endroit frais à l'abri de la chaleur et de l'humide.
- **Code ACL** : Néant
- **Code LPPR** : Néant

- **Code cladimed** : Néant
- **Normes CE 0459**
- **Classe** : I

*Selon la directive européenne 93/42 CEE sur les dispositifs médicaux*

### CONDITIONNEMENT

- Blister individuel stérile
- Carton de 50 unités

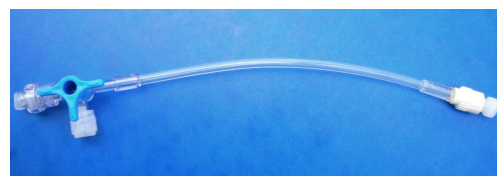

**Distribué par:**

**L.D.T.A.S APOTECNIA - KELIS MEDICAL**

51-55 Avenue des Templiers - ZAC de Napollon - 13400 Aubagne

Fax : 04 42 03 55 02

E-mail : [serviceclient@apotecnia.com](mailto:serviceclient@apotecnia.com) /

[www.apotecnia.com](http://www.apotecnia.com)

[www.kelis-medical.com](http://www.kelis-medical.com)

[serviceclient@kelis-medical.com](mailto:serviceclient@kelis-medical.com)